


Массажер для шеи

Askona Performance Power Neck Light

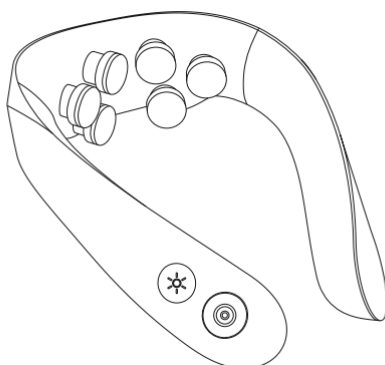

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА ЗАПРЕЩЕНО:

- Беременным женщинам, женщинам в период менструации или послеродовой лихорадки;
- Детям младше 12 лет;
- После перенесенного инсульта;
- Лицам с ограниченными возможностями, теми, кто не обладают способностью выразить ясно свои мысли, в противном случае это может привести к несчастному случаю или вызвать физический дискомфорт;
- Лицам в состоянии алкогольного опьянения;
- При температуре тела 38 градусов и выше (период лихорадки);
- Лицам с нестабильным артериальным давлением;
- Тем, кто не чувствителен к нагреву, и тем, кто склонен к ожогам;
- Лицам с внедренными медицинскими электронными устройствами, такими как кардиостимуляторы;
- Лицам с злокачественными опухолями, заболеваниями сердца, тяжелой гипертонией;
- Лицам с серьезными повреждениями кожного покрова;
- Лицам, страдающим от остеопороза (хрупкость/ломкость костей);
- Лица с деформированными суставами, недавними переломами;
- Лицам с аллергией на контактные накладки из нержавеющей стали;
- Не используйте в местах с повышенной влажностью (например, ванная комната) и во время принятия душа, так как это может привести к травмам и повреждению прибора;
- Не используйте прибор в сочетании с другим терапевтическим оборудованием, электрическим одеялом и т.п., так как это может привести к неэффективности или травме.