

Массажер для тела
Power Body Pocket Gun

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

▶ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

No.	Проблема	Возможная причина	Возможное решение
1	Во время работы слышен шум	Это нормально и происходит из-за движения механических деталей	Нет необходимости принимать какие-либо меры
		Внутренние детали ослаблены	Пожалуйста, отправьте устройство в авторизованный сервисный центр
2	Массажер не запускается	Низкий заряд батареи	Зарядите аккумулятор и перезагрузите устройство
		Устройство перегружено, и система защиты от перегрева отключает питание	Нажмите кнопку питания после остывания, чтобы перезапустить устройство
		Выключатель питания выключен	Включите выключатель питания
3	Массажер перестает работать во время использования	Таймер по умолчанию (15 минут) истекает	Зажмите кнопку включения, чтобы перезапустить
		Низкий заряд батареи	Зарядите аккумулятор и перезапустите
4	Появляется дым, или необычный запах во время использования	Прибор неисправен	Немедленно прекратите пользование и отправьте устройство в авторизованный сервисный центр
5	Аккумулятор не заряжается	Испорченная батарея	Пожалуйста, свяжитесь с нашей сервисной службой для получения поддержки

▶ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: Массажер для тела Askona Performance Power Body Pocket Gun

Модель: G20

Входящее напряжение: 5 В

Входящий ток: 2.5 А

Срок гарантии – 12 месяцев

Инструкции по уходу

Очищение

- ▶ Перед чисткой обязательно выключите питание и отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- ▶ Протрите поверхность изделия мягкой тканью.
- ▶ Для удаления пятен протрите пятно мягкой тканью, смоченной водой или мягким нейтральным моющим средством, затем вытрите другой тканью.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Никогда не подключайте и не выдергивайте шнур питания мокрыми руками.
- ▶ Никогда не мойте данное изделие водой и не проливайте на него воду или другую жидкость.
- ▶ Не используйте на изделии бензол, разбавитель или другие растворители, это может привести к выцветанию или повреждению изделия.
- ▶ Не пытайтесь самостоятельно демонтировать устройство, пока оно мокрое, высушите его на воздухе.

Уход и техническое обслуживание

- ▶ Перед проведением технического обслуживания обязательно отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- ▶ Поместите его в среду, свободную от влаги, высокой температуры и летучих газов.
- ▶ Если продукт не используется в течение длительного периода времени, рекомендуем упаковать его в коробку, чтобы уберечь от пыли.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Не оставляйте данное изделие на длительное время под прямыми солнечными лучами. Это может привести к выцветанию или повреждению.

Полезные советы. Во время ежедневного использования, пожалуйста, проверьте наличие следующих симптомов:

- ▶ Запах гари.
- ▶ Питание включается и выключается при прикосновении к зарядному кабелю.
- ▶ Шнур питания перегрелся.
- ▶ Поврежден шнур питания.
- ▶ Другие ненормальные симптомы.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Пожалуйста, прекратите использование изделия, чтобы избежать поломок или несчастных случаев, при наличии любого из вышеперечисленных симптомов.
- ▶ Выключите кнопку питания и отсоедините вилку, обратитесь в нашу сервисную службу для ремонта.
- ▶ Не пытайтесь ремонтировать или демонтировать прибор без разрешения.

Благодарим вас за покупку этого товара!

Развитие науки и техники значительно изменило наш образ жизни, и сохранение здоровья превращается из модного слова в полномасштабное движение.

Данный мини-массажер карманного размера – отличное удобное приспособление для помощи больным мышцам в удобное для вас время. Карманный массажный пистолет с беспроводным минималистичным дизайном и стильным оформлением, очень легкий и портативный.

Используя высокочастотную бесшумную технологию длинного хода с бесщеточным двигателем с высоким крутящим моментом, этот массажный пистолет обеспечивает глубокий массаж тканей для облегчения мышечной боли, вызванной долгим сидением или интенсивными занятиями спортом.

Легкий, компактный, с несколькими массажными насадками, управление одной кнопкой, 4 настройки интенсивности, перезаряжаемая батарея для беспроводного использования – этот массажный пистолет станет вашим идеальным персональным массажистом после тренировки.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием, чтобы обеспечить правильную работу. Пожалуйста, сохраните данное ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ РУКОВОДСТВО надлежащим образом для дальнейшего использования.

▶ СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	1
НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА.....	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	5
Предварительные проверки.....	5
Панель управления.....	5
Установка массажных насадок.....	6
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ.....	7
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	8
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	8




▶ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры предосторожности

- ▶ Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ техники безопасности.
- ▶ Обеспечьте правильную работу данного прибора.
- ▶ Меры предосторожности и предупреждения, перечисленные ниже, помогут обеспечить правильную эксплуатацию данного прибора. Классы несчастных случаев, вызванных неправильным использованием, подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО. Прочтите все предупреждения и предостережения, приведенные ниже, и следуйте всем инструкциям, содержащимся в данном руководстве.


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей.
 ОСТОРОЖНО	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей или повреждению изделия.
 ЗАПРЕЩЕНО	 НЕ РАЗБИРАТЬ!

Не подходит для лиц, указанных ниже. При использовании данного изделия детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями на нем или рядом с ним необходим тщательный надзор.



 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	<p>Мы рекомендуем тем, у кого есть любое из следующих состояний, проконсультироваться со своим лечащим врачом перед использованием.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Те, у кого в тело имплантирован кардиостимулятор или другие электронные устройства. ◆ Те, кто проходит лечение, особенно те, кто плохо себя чувствует. ◆ Лица со злокачественными опухолями, злокачественными абсцессами, гипертонией или заболеваниями сердца (нуждаются в наблюдении). ◆ Женщины, которые беременны или у которых менструация. ◆ Те, у кого остеопороз, деформированные суставы, дисфункция или недавний перелом. ◆ Те, у кого серьезные повреждения кожных покровов. ◆ Те, у кого сильная лихорадка. ◆ При использовании данного изделия детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями на нем или рядом с ним необходим тщательный надзор. ◆ Те, кто страдает инфекционными заболеваниями. ◆ Те, кто принимает лекарства.
 ЗАПРЕЩЕНО	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Не позволяйте детям пользоваться данным изделием или играть с ним. ◆ Может быть смертельно использовать массажный пистолет в области головы, шеи или сердца. ◆ Под наблюдением врача вы можете использовать массажный пистолет для воздействия на шейный отдел позвоночника или заднюю часть спины. ◆ Если шнур питания поврежден, немедленно выключите питание и не используйте устройство. ◆ Если массажер упадет в воду, не используйте его. Отправьте в авторизованный сервисный центр. ◆ Не подносите пальцы, волосы или другие части тела близко к стержню ударного устройства, чтобы избежать травм пользователей или повреждения изделия.
 НЕ РАЗБИРАТЬ	Не пытайтесь ремонтировать или демонтировать прибор без разрешения. Пожалуйста, обратитесь к официальному дилеру или сервисному агенту.

▶ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

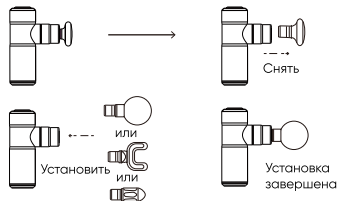
Установка массажных насадок



ЗАПРЕЩЕНО:

-  Не прикасайтесь к этой детали, когда устройство работает без установленной массажной насадки.
-  Не прикасайтесь к этой детали, когда устройство работает с установленной массажной насадкой.

- ▶ Чтобы установить массажную насадку, выключите прибор, совместите массажную насадку с осью массажного пистолета, медленно вставьте и убедитесь, что она вставлена на место.

 **ВНИМАНИЕ**

- ▶ Перед началом работы убедитесь, что массажная насадка правильно вставлена и закреплена на месте. Мы рекомендуем начинать с низкой скорости /интенсивности, постепенно увеличивать ее и чередовать скорость /интенсивность.
- ▶ Чтобы снять массажную насадку, выключите питание, крепко возьмитесь за батарейный отсек и с силой потяните массажную насадку.

Предварительные проверки


- ▶ Внимательно проверьте изделие перед применением.
- ▶ Зарядите аккумуляторную ручку в течение 3-4 часов перед первым использованием, чтобы убедиться в полном заряде аккумулятора.
- ▶ Подключите адаптер питания к разъему для зарядки и вставьте адаптер питания в электрическую розетку. (проверьте ниже рис.)



ВНИМАНИЕ

- ▶ Массажный листочек не включается и не работает во время зарядки.
- ▶ Перед первым использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- ▶ Индикатор загорится красным во время зарядки и переключится на зеленый, когда аккумулятор будет полностью заряжен.
- ▶ При высоком уровне заряда батареи индикатор будет непрерывно мигать 3 раза каждые 5 секунд.
- ▶ Индикатор мигает красным, когда уровень заряда батареи ниже 10%, пожалуйста, зарядите его.
- ▶ По умолчанию прибор работает 15 минут, по истечении этого времени он автоматически выключается. Нажмите кнопку питания / интенсивности для перезапуска. Он автоматически выключится через 3 минуты без дальнейшего использования.

Панель управления

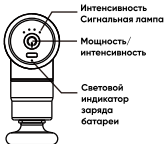

Ⓜ Включение / Отключение питания

- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
- Индикатор заряда батареи загорится зеленым светом, 4 индикатора интенсивности загорятся один за другим.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд еще раз, чтобы выключить устройство.

Ⓜ Регулирование интенсивности

- Нажмите эту кнопку, чтобы включить устройство. Начнет работать режим низкой интенсивности.
- Нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы перейти в режим повышенной интенсивности (с уровня 1 по уровень 4).
- Когда запущен режим максимальной интенсивности, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы переключиться в режим низкой интенсивности.
- Количество горящих индикаторов интенсивности соответствует уровню интенсивности.



ОБЯЗАТЕЛЬНО

- ◆ Мы рекомендуем пользоваться устройством в течение 15 минут.
- ◆ Не кладите на изделие тяжелые предметы.
- ◆ Не пользуйтесь устройством мокрыми руками. Не используйте его на открытом воздухе.
- ◆ Не наносите его непосредственно на чувствительные участки, сильное постукивание может привести к образованию синяка, покалываю, выберите правильный уровень интенсивности.
- ◆ Не используйте массажер под одеялом, так как он может перегреться и привести к возгоранию или травмам.
- ◆ Никогда не используйте прибор с заблокированным отверстием для подачи воздуха.
- ◆ Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях не было волос и тому подобное.
- ◆ Не погружайте изделие в воду для чистки, чтобы избежать попадания воды на панель управления.
- ◆ Если изделие перенесено из помещения с низкой температурой в теплое место, подождите час перед использованием, чтобы избежать повреждения, вызванного конденсацией паров. Пожалуйста, подождите час, пока концентрация влаги не достигнет максимума, и протрите его, чтобы избежать возможных повреждений. Не смешивайте аккумуляторы, разные типы аккумуляторов могут повредить ваше устройство или привести к утечке заряда батареи или возгоранию.
- ◆ Не роняйте изделие на твердую поверхность и не используйте его ненадлежащим образом.
- ◆ Используйте данное изделие только по назначению, как описано в данном руководстве, не используйте другие терапевтические устройства вместе с данным изделием.
- ◆ Выньте вилку из розетки при отключении питания, переключите все элементы управления в положение выкл.
- ◆ Если вы заметили какой-либо ненормальный симптом или неисправность во время работы данного устройства, немедленно выключите питание и не используйте устройство.
- ◆ Не используйте изделие, если у него поврежден шнур или вилка, верните изделие в наш центр обслуживания клиентов для проверки и ремонта.
- ◆ Не используйте во влажной среде, чтобы избежать утечки электричества.
- ◆ Если вы почувствуете какой-либо ненормальный дискомфорт во время работы данного устройства, немедленно выключите питание и не пользуйтесь устройством.
- ◆ Снимите массажную насадку после использования и упакуйте изделие в надежное место.



ЗАПРЕЩЕНО

- ◆ Не используйте продукт сразу после еды, это может вызвать дискомфорт.
- ◆ Избегайте использования продукта в состоянии алкогольного опьянения.
- ◆ Не используйте данное изделие во время грозы или разряда молнии.
- ◆ Не используйте газ, банановое масло для очистки продукта, не распыляйте инсектициды на продукт.
- ◆ Не используйте данный прибор при температуре выше 40°C.
- ◆ При температуре ниже 5°C смазочные материалы застывают и увеличивают трение.
- ◆ Не заряжайте устройство при температуре ниже 0°C, чтобы избежать перегрузки аккумулятора и сокращения срока его службы.
- ◆ Не курите во время использования данного изделия во избежание возгорания.
- ◆ Не наносите этот продукт на интимные части тела.
- ◆ Утилизируйте упаковочные пластиковые пакеты надлежащим образом и следите за тем, чтобы дети не играли с ними.
- ◆ Не давите на сердце во время использования этого продукта, в противном случае это может вызвать дискомфорт.
- ◆ Не используйте его для длительных сеансов, чтобы избежать дискомфорта.
- ◆ Используйте данное изделие только по назначению, как описано в данном руководстве.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ◆ Не наносите средство на поврежденную кожу и вокруг нее.
- ◆ Если у вас есть мышечное напряжение, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта.
- ◆ Не используйте массажный пистолет на шейном отделе позвоночника или спине (за исключением П-образной насадки), на голове и лице.
- ◆ Не наносите его непосредственно на костные участки, наносите только на мягкие ткани с надлежащей интенсивностью.
- ◆ Это нормально, что изделие становится горячим после длительной работы.
- ◆ Данное изделие содержит специальную аккумуляторную батарею, не извлекайте ее из изделия для зарядки и не используйте с другим изделием.
- ◆ Не ставьте его на открытый огонь, чтобы избежать перегрева.
- ◆ Храните извлеченный аккумулятор вдали от детей младшего возраста во избежание травм.
- ◆ Пожалуйста, обращайтесь с изделием должным образом, чтобы избежать повреждения.
- ◆ Не соединяйте две клеммы аккумулятора непосредственно с проводящим металлом.
- ◆ Если ваш ребенок проглотил батарейку, немедленно обратитесь в больницу.
- ◆ Если произошла утечка из аккумулятора, избегайте контакта с обожженной кожей, чтобы предотвратить химические ожоги. Если вы все-таки соприкоснетесь с протекающей батареей, тщательно промойте кожу водой.
- ◆ Разбирайте прибор только для утилизации, пожалуйста, обратитесь за техническим обслуживанием к официальному дилеру или сервисному агенту.
- ◆ Батареи можно повторно использовать после использования, пожалуйста, повторно используйте литиевую батарею с помощью местных программ.
- ◆ Перед утилизацией прибора извлеките из него батарейки.
- ◆ Перед извлечением батареек отключите источник питания.

НАИМЕНОВАНИЕ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА

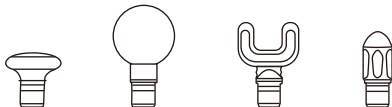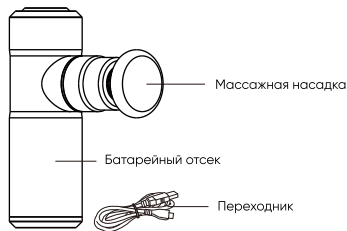

Плоская насадка

Подходит для расслабления различных групп мышц.

Шарообразная насадка

Подходит для массажа крупных мышц, таких как руки, спина, ягодицы, бедра и икры.

П-образная насадка

Подходит для массажа шеи, позвоночника и ахиллова сухожилия.

Цилиндрическая насадка

Подходит для воздействия на глубокие слои кожи, например, в зонах ладоней и ступней.